

PRÉCAUTIONS D'USAGE

À L'ATTENTION DU PATIENT

Utilisation et entretien du système SCi



Système SCi :

Suppression des tensions et dysfonctionnements musculaires, et lutte contre le bruxisme par l'inhibition du nerf trijumeau.



ATTENTION

Si votre système SCi devient mobile lorsqu'il est en bouche, ou si vous parvenez à le retirer par la seule action de la langue ou de vos lèvres quelle que soit l'intensité de la pression que vous exercez.

Interrompez immédiatement le traitement et prenez rendez-vous avec votre chirurgien-dentiste afin qu'il le réadapte. Ne tentez sous aucun prétexte de modifier vous-même votre système.

En plus des conseils que votre chirurgien-dentiste vous a donné, **lisez attentivement ces précautions.**

Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation et de l'entretien de ce système, contactez votre chirurgien-dentiste.

Si vous avez été suivi par un **autre spécialiste**, assurez-vous auprès de lui que l'usage de ce système ne vous est pas contre-indiqué, en raison de votre état de santé ou des médicaments que vous prendriez.

Interrompez le traitement & appelez de suite votre chirurgien-dentiste, dans les cas suivants :

- Si vous observez quoi que ce soit d'**inhabituel** en regardant vos dents, vos gencives, votre langue ou votre bouche.
- Si vous sentez une **pression permanente** sur une dent lorsque vous portez le système, il doit être réadapté par votre chirurgien-dentiste. Le système doit tenir en place fermement, sans exercer de force ou de pression inutile sur une dent en particulier.
- Si le système **ne tient pas seul** ou si vous pouvez le retirer avec votre langue en appliquant une certaine pression. Le système doit être réajusté.
- Si votre système **se fendille, se fissure ou change d'aspect**.
- Si vous remarquez une **modification** de votre système (encoche, zone pointue...), s'il est inconfortable, abimé, trop serré ou trop lâche.

Informez votre chirurgien-dentiste de toute **allergie** dont vous souffririez.

Informez-le de toute **opération chirurgicale** dont vous auriez fait l'objet ou tout autre **motif** qui pourrait laisser supposer **qu'en cas d'ingestion** du système, il pourrait y avoir un risque d'obstruction (qui compliquerait son élimination par voies naturelles).

Si vous vous réveillez après avoir inséré le système convenablement et que le système n'est plus en place sur vos dents, asseyez-vous ou levez-vous pour replacer le système.

Assurez vous de ne pas pouvoir retirer le système avec votre langue.





ATTENTION

Contre-indications & précautions :

- Ne **pas boire, manger**, mâcher lorsque vous portez le système.
- Ne **pas consommer** d'alcool, de drogues ou de médicaments pouvant altérer la complète maîtrise de vos gestes, lorsque vous portez le système.
- Si vous êtes **malade** (rhume, grippe ou toute autre maladie risquant de provoquer une gêne lorsque vous portez le système), interrompez le traitement momentanément.
- Si vous **recevez des soins dentaires** après avoir commencé un traitement SCi, apportez votre système lors de vos rendez-vous avec le chirurgien-dentiste, afin de vérifier que les soins n'ont pas altéré la bonne adaptation de votre système en bouche.
- Insérer et retirer votre système uniquement en **position assise** ou **debout**. Ne jamais l'insérer ou le retirer en position allongée.
- Le système est adapté à un **usage personnel**, ne laissez personne d'autre l'utiliser pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
- Tenir le système à **l'écart des enfants et animaux domestiques**.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez votre système SCi **dans son boîtier**.
- Ne pas porter le système pendant plus de **8 heures par jour**.
- Si le SCi n'a pas été porté pendant un certain temps, il peut ne pas s'adapter correctement et nécessiter un **ajustement** par votre chirurgien-dentiste.



Le dispositif SCi est réservé à un usage médical ne pouvant être utilisé sans l'accord d'un professionnel de santé et suite à un examen réalisé par un chirurgien-dentiste.

SCi est un dispositif médical de classe 2A, répondant aux normes CE.

European Authorized Representative : Ermgo Europa / Molenstraat 15 – 2513 BH-THE HAGUE-NETHERLANDS

FDA USA : Reconnu comme dispositif médical à usage dentaire et comme traitement contre la migraine chronique.

Fabriqué aux USA par Therapeutic Solutions Int./4093 Oceanside Boulevard CA 92056 USA

ENTRETIEN DU SYSTÈME ET DE SA BOÎTE


- Avant de placer le système, il est indispensable de se **brosser les dents** et rincer convenablement la bouche et le système.
- **Nettoyez votre système après chaque utilisation** : rincez à l'eau froide et brossez à l'aide d'une brosse à dents souple. **ATTENTION** : Ne jamais utiliser d'eau chaude, au risque d'endommager le système et rendre peu fiable son utilisation.
- Non abrasives, les **solutions pour l'hygiène buccale** peuvent être utilisées pour entretenir votre système. Cependant, le système ne doit pas être baigné dans cette solution pendant une longue période au risque de le détériorer.

MEMO

Apportez votre système à tous les rendez-vous chez votre chirurgien-dentiste, le système peut nécessiter un réajustement.

Le chirurgien-dentiste doit examiner régulièrement tous les appareils et prothèses que vous portez en bouche afin de garantir les performances optimales de l'appareil..

Votre chirurgien-dentiste est à votre disposition pour toute question complémentaire :

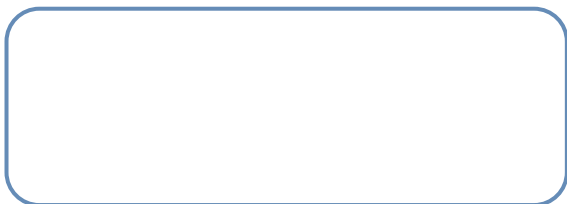

SDC

SOCIÉTÉ DES CENDRES

DEPUIS 1859

SDC - Société Des Cendres
13 rue du Général Mocquery
37550 Saint-Avertin
01 49 61 41 41 - info@sdc.fr
www.sdc.fr