

# exeol Daspi

## Détergent désinfectant des tuyaux d'aspiration dentaire

### ASPIRATION DENTAIRE


**Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection quotidienne des surfaces internes des tuyaux d'aspiration connectés à l'unit dentaire.**

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette. Délai de conservation après ouverture : 6 mois / 3 mois (avec pompe doseuse fixée sur le bidon).

Veuillez consulter les recommandations de retraitement du système d'aspiration défini par le fabricant de l'unit dentaire.

**Préparation de la solution :** Par tuyau d'aspiration : 1L d'eau + 20mL de **exeol D aspi**. Pour 2 tuyaux d'aspiration : 2L d'eau + 40mL de **exeol D aspi**.


#### Flacon 1L doseur

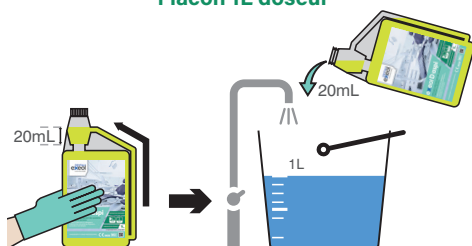


1. Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée.
2. Diluer la totalité de la dose obtenue dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante : 2% (20mL/L).
3. Mélanger la solution diluée.

Refermer le flacon après utilisation.

#### Utilisation

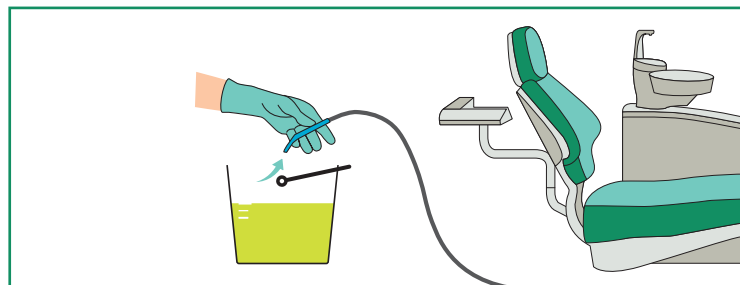

- 1 Selon les instructions du fabricant de l'unit dentaire, aspirer la solution diluée dans les tuyaux d'aspiration immédiatement après sa préparation.

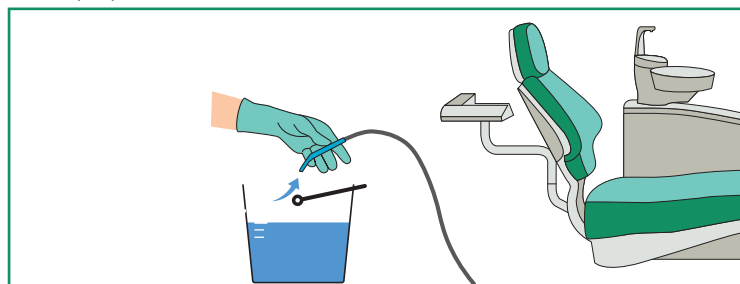

- 3 Rincer à l'eau.

**Ne pas utiliser pour l'entretien quotidien des canules, des connecteurs et des filtres du système d'aspiration des unit dentaires.** Ne pas utiliser pour le nettoyage hebdomadaire des tuyaux d'aspiration des unit dentaires. Ne pas mélanger à d'autres produits. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



EPI :

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Marquage CE obtenu en 2023  
DM classe IIa

CE 0459

MD

FABRIQUÉ EN FRANCE


Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL : +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)



Retirer la bague d'inviolabilité

#### Bidon 5L


1 pression = 20mL

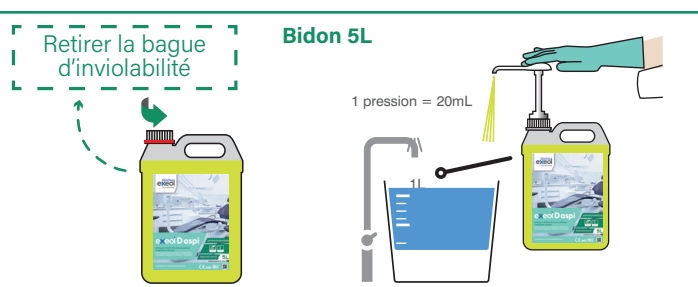

Lors de la première utilisation, retirer la bague d'inviolabilité puis dévisser le bouchon.

1. Dévisser le bouchon du bidon.
2. Utiliser un système de dosage adapté. En cas de nécessité d'amorçage du système de dosage (ex : pompe doseuse), ne pas utiliser la dose obtenue avant amorçage complet.
3. Diluer le concentré dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante : 2% (20mL/L).
4. Mélanger la solution diluée.

Refermer le bidon après utilisation si le système de dosage ne reste pas positionné sur le bidon.

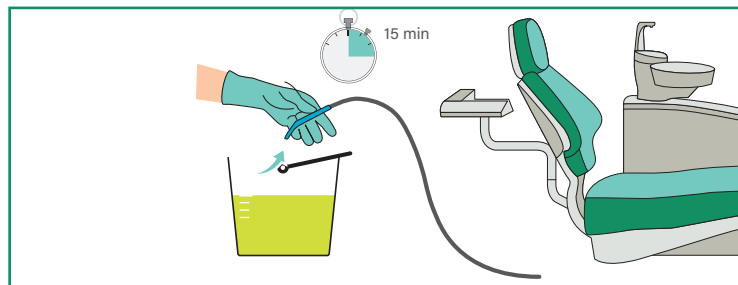

- 2 Temps de contact : 15 min. Respecter le temps de contact recommandé.

- 4 Eliminer la solution diluée après chaque utilisation.

Le traitement des surfaces internes des tuyaux d'aspiration s'effectue au moins une fois par jour, en fin journée.

# DENTAL exeol

UNE DIVISION SODEL