



EMPREINTES DENTAIRES

exeol D print

Désinfectant des empreintes dentaires par pulvérisation


Solution prête à l'emploi pour la désinfection des empreintes dentaires.

Ne pas mélanger à d'autres produits. Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

⚠ **exeol D print** s'utilise non dilué sur une **empreinte préalablement rincée à l'eau** pour retirer le sang, les mucosités et tout autre résidu.




Flacon 1L spray

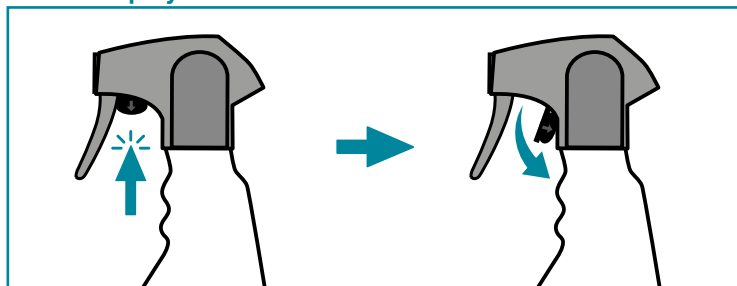


1 Lors de la première utilisation, détacher la protection d'invulnérabilité de la buse. Déverrouiller la sécurité du spray.



2 Après avoir éliminé l'excès d'eau, pulvériser uniformément toute la surface de l'empreinte.

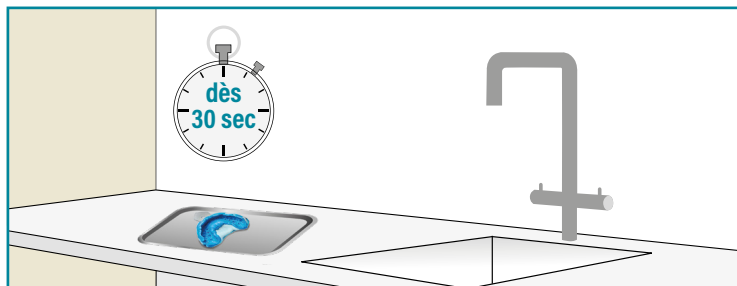


3 Temps de contact : dès 30 sec. selon le spectre d'activité recherché. Respecter le temps de contact recommandé.

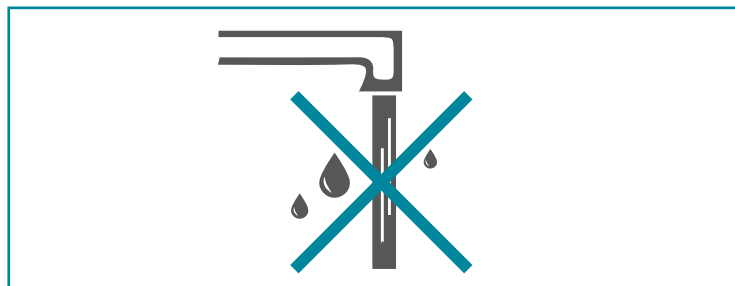

4 Ne pas rincer.



5 Déposer l'empreinte dans un emballage individuel selon les recommandations du fabricant du matériau pour empreinte.

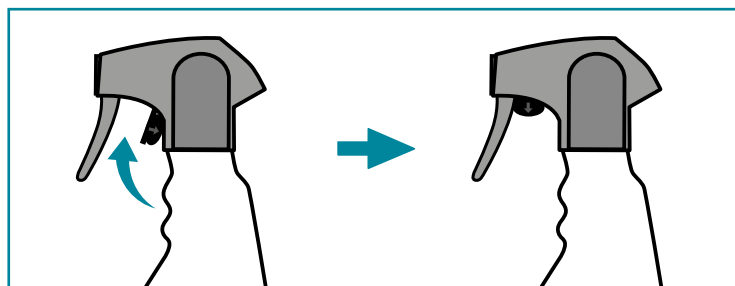

6 Verrouiller la sécurité après utilisation.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



EPI:

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL



Dossier produit disponible sur www.exeol.fr

Marquage CE obtenu en 2023
DM classe IIa

CE 0459



FABRIQUÉ EN FRANCE

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

DENTAL exeol

UNE DIVISION SODEL