

exeol renov

Rénovateur des instruments en acier inoxydable

- Formule concentrée à utiliser par immersion.
- Participe à la rénovation de la couche de passivation pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Utilisation en trempage manuel et en bacs à ultrasons.
- Redonne éclat et brillance aux instruments.
- Compatibilité avec l'acier inoxydable validée par étude électrochimique.




INSTRUMENTS

➕ PRODUIT

DÈS
1%

BONNES PRATIQUES

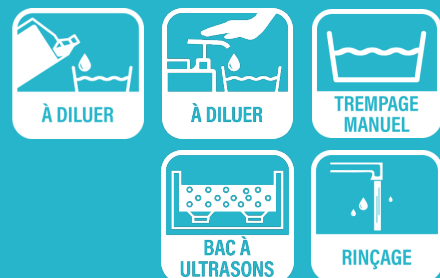

Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

Mode d'emploi

▪ Flacon 1L doseur :

Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue avec de l'eau à température ambiante : de 1% (10mL/L) à 4% (40mL/L). Refermer le flacon après utilisation.

▪ Bidon 5L :

Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon. Fixer la pompe de 10mL sur le bidon et l'amorcer. Ne pas utiliser la dose obtenue avant l'amorçage complet de la pompe.

À l'aide de la pompe doseuse, diluer le concentré avec de l'eau à température ambiante : de 1% (10mL/L) à 4% (40mL/L).

▪ Utilisation :

La solution diluée et non utilisée peut être conservée en bac couvert pendant 72h.

1. Placer les instruments en acier inoxydable ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés.

2. Temps de contact : 1 heure (ou plus dépendant de l'état de l'instrumentation).

3. Retirer les instruments en acier inoxydable, les rincer soigneusement à l'eau.

4. Sécher.

La solution utilisée doit être renouvelée après chaque utilisation.

▪ exeol renov peut être utilisé en bac à ultrasons.

Présentations commerciales

- Carton 3 x 1L doseur : EXS0117
- Carton 2 x 5L : EXS0131

Composition	Caractéristiques	Précautions
Moins de 5% d'agents de surface non ioniques.	▪ pH pur : 0,35 - 1,35 ▪ pH à 4% : 1,2 - 2,2 ▪ Parfum : Non parfumé. ▪ Couleur : Incolore à jaune pâle.	Utiliser uniquement sur des instruments en acier inoxydable. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : D7E9-405V-900U-V1Y2

DANGER



UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL