

exeol renov


Rénovateur des instruments en acier inoxydable



INSTRUMENTS


Avant utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Flacon 1L doseur

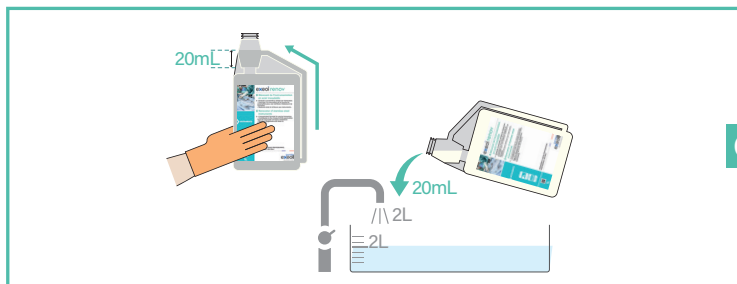

Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue avec de l'eau à température ambiante: de 1% (10mL/L) à 4% (40mL/L). Refermer le flacon après utilisation.


Bidon 5L

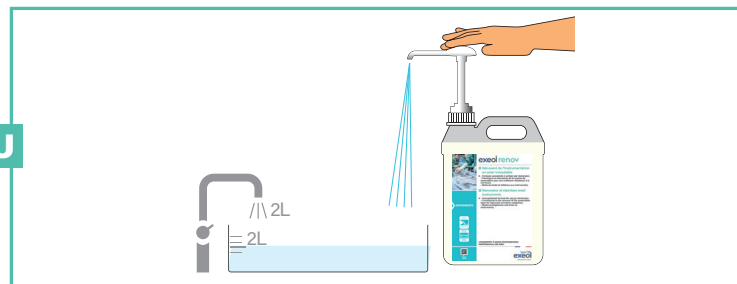


Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon. Fixer la pompe de 10mL sur le bidon et l'amorcer. Ne pas utiliser la dose obtenue avant l'amorçage complet de la pompe. À l'aide de la pompe doseuse, diluer le concentré avec de l'eau à température ambiante: de 1% (10mL/L) à 4% (40mL/L).

Utilisation :


La solution diluée et non utilisée peut être conservée en bac couvert pendant 72h.

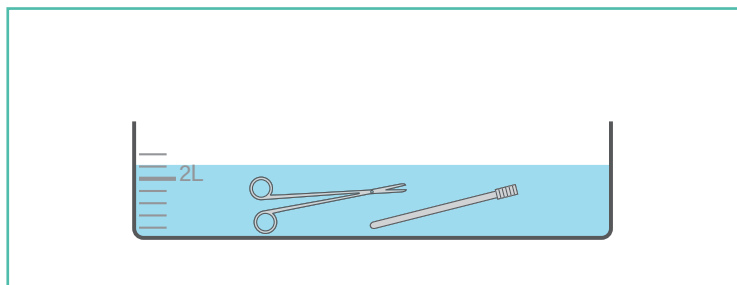


1 Placer les instruments en acier inoxydable ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés.

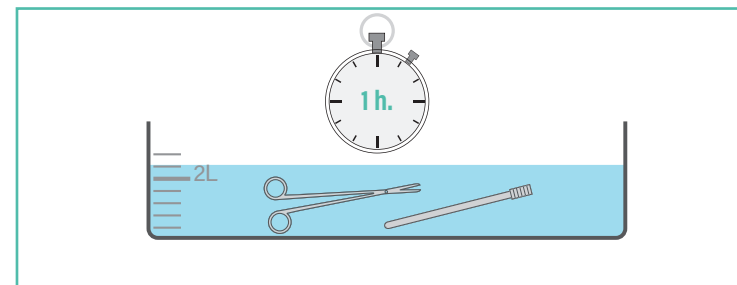

2 Temps de contact : 1 heure (ou plus dépendant de l'état de l'instrumentation).

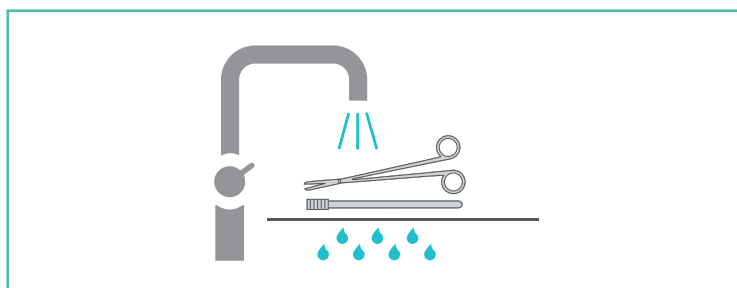

3 Retirer les instruments en acier inoxydable, les rincer soigneusement à l'eau.

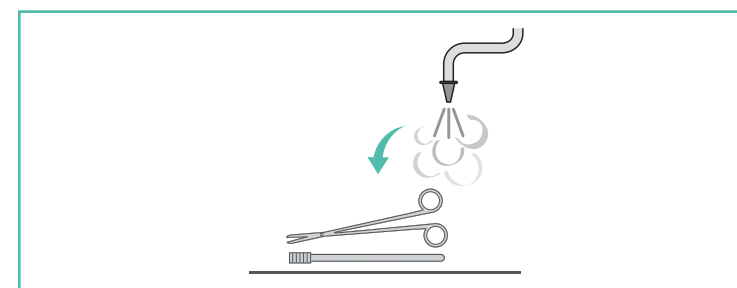

4 Sécher.

La solution utilisée doit être renouvelée après chaque utilisation.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. EPI :



UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr