

Aidite®



Biomic color opaque

| Couleur d'opaque précise | S'adapte à chaque teinte



Problématique métier

Face aux exigences esthétiques croissantes, les matériaux en zircone hautement translucides sont largement utilisés en raison de leur excellente translucidité. Cependant, leur effet opacifiant sur les piliers plus foncés, tels que les piliers implantaires et les dents tachées par la tétracycline, est insuffisant, ce qui ne répond pas aux exigences d'opacification et esthétiques.

Pour remédier à ce problème, Aidite a développé le liquide opaque coloré Biomic. Grâce à sa simplicité d'utilisation, il permet d'augmenter l'opacité des restaurations afin de diminuer la visibilité de piliers foncés et d'obtenir un résultat final d'une grande esthétique.

Informations produit

Grande opacité

Masque efficacement les piliers implantaires et les piliers foncés tout en maintenant une excellente translucidité de la restauration finale.

Faible perméabilité

La profondeur de pénétration est inférieure à 0,15 mm, garantissant l'absence d'impact sur la teinte originale de la restauration.

Teinte personnalisable

La teinte et l'opacité peuvent être ajustées en fonction de chaque cas, répondant ainsi aux exigences personnalisées.


Protection d'infiltration

Fourni avec un liquide protecteur qui peut être appliqué sur les zones fines de la restauration (par exemple, les marges cervicales) afin de prévenir l'infiltration superficielle



Teintes

Avec cinq teintes (A, B, C, D et W), il est applicable à tous les types et toutes les teintes de restaurations en zircone.

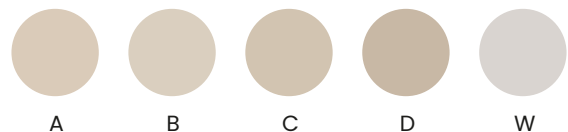


Comparaison avant et après application



Apply to the inner crown
(Before sintering)



Apply to the inner crown
(After sintering)

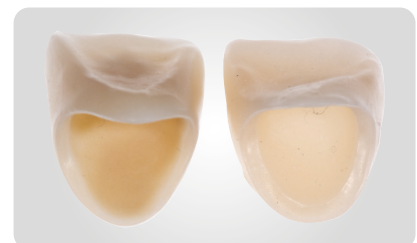


Comparison of opacity
(Left with opaque liquid, right without opaque liquid)





Test de profondeur d'infiltration

Schéma en coupe du liquide opaque de couleur Biomic appliqué sur la couronne dentaire.


La partie verte représente la profondeur d'infiltration.

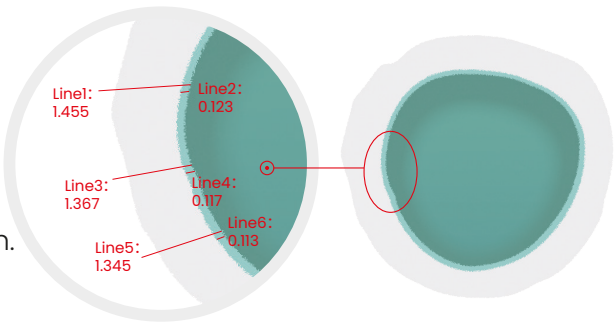

Paramètre produit

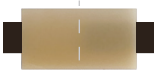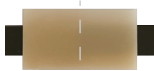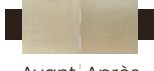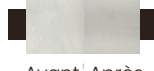Teinte	A-OP	B-OP	C-OP	D-OP	W-OP
					
Étendue d'application	Restauration des teintes A	Restauration des teintes B	Restauration des teintes C	Restauration des teintes D	Restauration Bleach
Prodonteur d'infiltration (par dose)	0.113mm	0.125mm	0.134mm	0.101mm	0.095mm
Effet à l'exterieur de la couronne					
Effet dans la couronne					
	Avant Après	Avant Après	Avant Après	Avant Après	Avant Après
Taux de réduction de la valeur de translucidité	31%	30%	33%	28%	24%

Cas

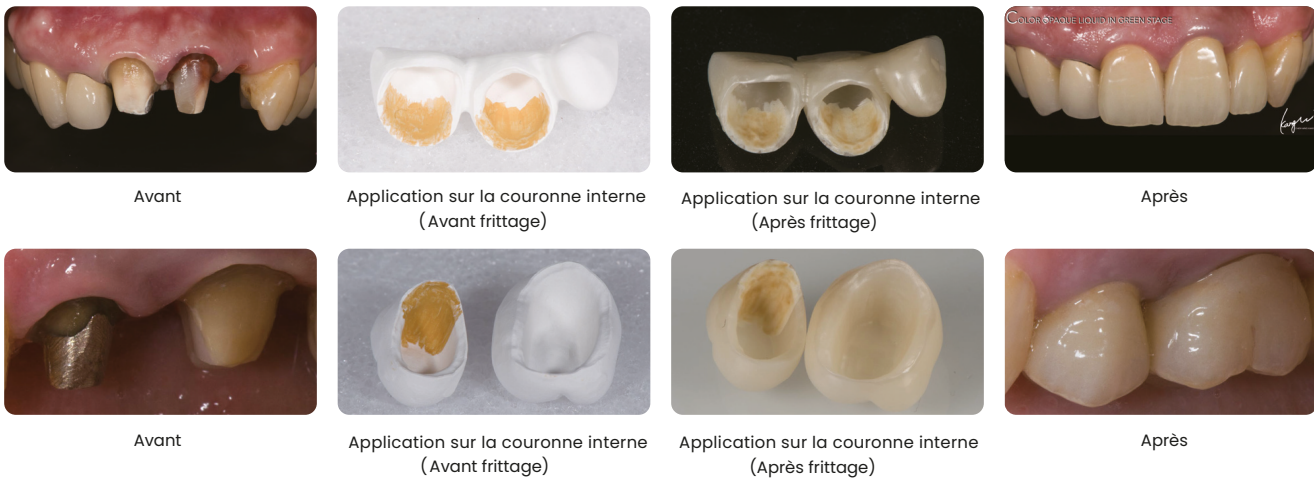

Merci au Dr. Zhenyuan Hong pour le partage du cas clinique en images

INTÉRESSÉ.E ?

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL.E DE SECTEUR



Thierry BALOIN
06 30 37 54 60
thierry.baloin@sdcc.fr



Aniele ROBIN
06 15 87 59 75
aniele.robin@sdcc.fr



Jean-François PATTE
06 66 98 77 86
jean-francois.patte@sdcc.fr




Charline GLASER
06 14 04 04 45
charline.glaser@sdcc.fr



Frédéric TEIXEIRA
06 35 35 24 84
frederic.teixeira@sdcc.fr



Ferialle BICHARI
06 66 98 76 92
feriellle.bichari@sdcc.fr

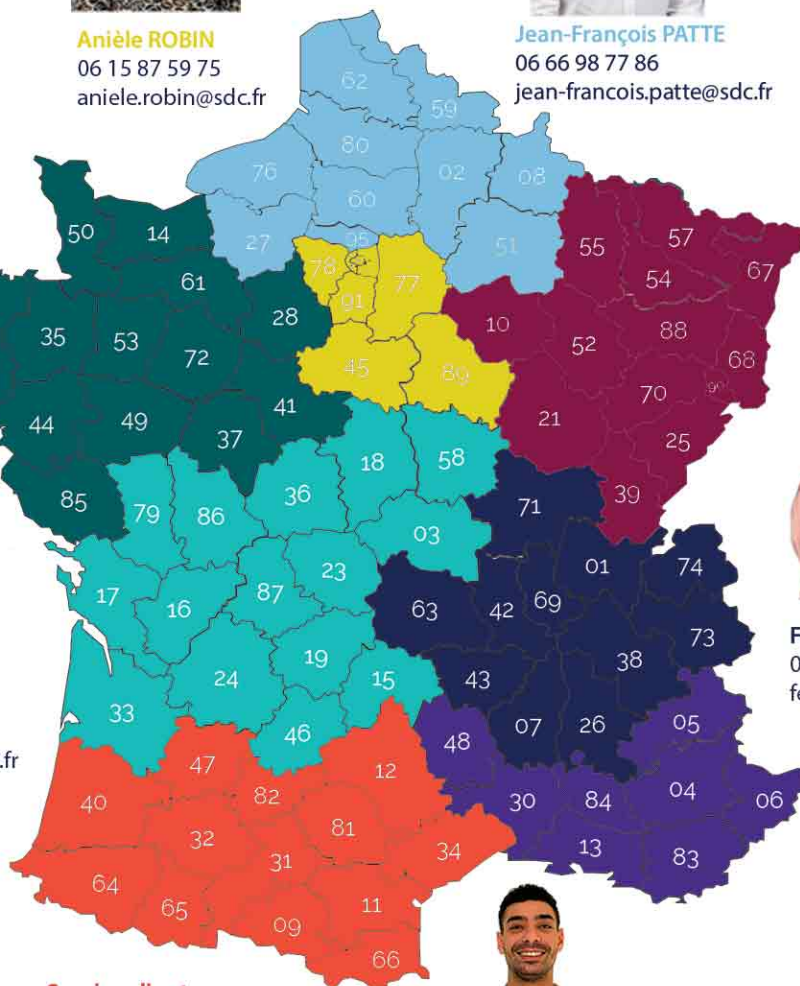

Service clients
01 49 61 41 41
commandes@sdcc.fr



Samy-Théo MELLAL
06 15 87 71 21
samy-theo.mellal@sdcc.fr

